

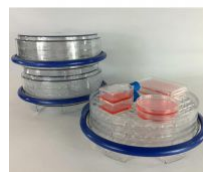


BRINKUBATOR MIC-101

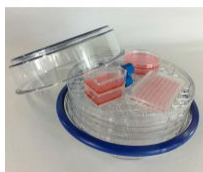

INNE ZDJĘCIA

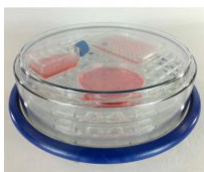

OPIS OGÓLNY

Szeroko stosowany na świecie od ponad 20 lat do hodowli komórkowej w mieszaninie gazów o różnym stężeniu. Ta bezpieczna i niezawodna komora stosowana jest do IVF, izolacji wirus HIV, wytwarzania środowiska niedotlenienia, nadmiaru tlenu lub normalnych warunków tlenowych, hodowli organów, hodowli komórek macierzystych. Każdy z dostępnych modeli jest samowystarczalnym inkubatorem umożliwiającym stworzenie właściwych warunków środowiska prowadzonych hodowli (stężenie gazów i wilgotność).

Komora **MIC-101** zapewnia znakomitą jakość i trwałość. Wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu, indywidualnie testowana pod względem wycieków spod uszczelki. Użycie przezroczystego poliwęglanu umożliwia obserwację hodowli bez potrzeby otwierania inkubatora:

- wielopoziomowość brinkubatora umożliwia wygodne przechowywanie szalek Petriego, butelek do hodowli tkankowej lub płytek,
- komory inkubatora mogą być składowane w kolumnach, co pozwala zaoszczędzić miejsce w laboratorium,
- wszystkie elementy inkubatora wykonane są z surowców nietoksycznych, łatwych do sterylizacji alkoholem,
- wnętrze komory pozbawione ostrych rogów ułatwia czyszczenie i dezynfekcję,
- cylindryczny kształt inkubatora ułatwia dokładne rozprowadzenie gazu w komorze.

MODELE

- **MIC-101**

SPECYFIKACJA

MODEL	MIC-101
Pojemność komory (ok. 8 litrów)	84 x szalki 35 mm
	27 x szalki 60 mm
	12 x szalki 100 mm
	9 x płytki 96-dołkowe
	18 x butelki do hodowli 25 cm ²
Wymiary zewnętrzne (o x H) [cm]	31 x 11
Wymiary wewnętrzne [cm]	średnica 26,7, prześwit między poziomami 2,3

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- przepływomierz jednokanałowy, **single flow meter**,
- przepływomierz dwukanałowy, **dual flow meter**.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl