


STACJA ROBOCZA BEAUTY CELL N-BIOTEK NB-803MS I NB-803MSF




INNE ZDJĘCIA



Clean bench

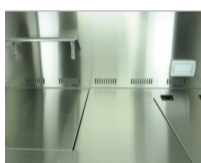

Wide Work Table

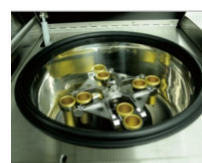

Centrifuge



OPIS OGÓLNY

Wielofunkcyjna stacja robocza z wbudowaną wirówką i inkubatorem z wytrząsaniem.

Izolacja komórek macierzystych (Stem Cell Isolation) i utrzymywanie komórek (Cell Handling) jest przeprowadzana perfekcyjnie w czystym środowisku.

- **wirówka z chłodzeniem ogólnego zastosowania (dla modelu NB-803MSF)** - zaprojektowana dla wielu zastosowań jak izolacja komórek lub odwirowanie krwi. 24 probówki standardowe (15 mL) mogą być wirowane równocześnie,
- **inkubator z wytrząsaniem** - inkubator z wytrząsaniem stosowany jest do mieszania lub inkubacji próbek w medium po wirowaniu. Temperatura i prędkość obrotów może być regulowana przy pomocy wodoodpornego panelu kontrolnego,
- **stacja bio-robocza** - czyste środowisko pracy jest zapewniane przez filtrację HEPA (skuteczność 99,99%) i sterylizację promieniami UV. Siła obiegu powietrza może być regulowana od mocnego do słabego. Laminarny przepływ powietrza tworzy kurtynę zapobiegającą przenikaniu zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego,

- **włączniki nożne** - zaprojektowane do włączania i wyłączania wirówki i inkubatora z wytrząsaniem,
- **filtry HEPA** - komora jest wyposażona w filtry o skuteczności 99,99% dla cząsteczek 0,3 μ,
- **czujnik ciśnienia** - poprzez sprawdzanie czujnika ciśnienia, który wskazuje poziom wewnętrznego ciśnienia powietrza możemy kontrolować stopień zapchania filtra lub jego uszkodzenie,
- **różne opcje dostępne na życzenie** - dostosuj stację roboczą do swoich potrzeb, wyposaż komorę w niezbędne urządzenia.

MODELE

- **NB-803MS**
- **NB-803MSF**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001

SPECYFIKACJA

MODEL	NB-803MS	NB-803MSF
Filtr główny	HEPA o skuteczności 99,99% dla cząstek 0,3 μ	HEPA o skuteczności 99,99% dla cząstek 0,3 μ
Filtr wylotowy	HEPA o skuteczności 99,99% dla cząstek 0,3 μ	HEPA o skuteczności 99,99% dla cząstek 0,3 μ
Lampa UV [W]	2 x 20	2 x 20
WIRÓWKA		
Max. prędkość [obr./min]	5000	5500
Max. przyspieszenie [x g]	4612	5580
Max. pojemność	480 mL, 32 x 15 mL (rotor wychylny)	480 mL, 32 x 15 mL (rotor wychylny)
Zakres temperatury [°C]	-	od -5 do +60
Kontroler	mikroprocesor cyfrowy PID	mikroprocesor cyfrowy PID
Napęd	bezsztotkowy, bezobsługowy	bezsztotkowy, bezobsługowy
Timer	99 godz. 59 min lub tryb pracy ciągłej	99 godz. 59 min lub tryb pracy ciągłej
INKUBATOR Z WYTRZĄSIANIEM		
Zakres temperatury [°C]	+5 powyżej temp. otoczenia do +60	+5 powyżej temp.otoczenia do +60

Zakres prędkości [obr./min]	30-300	30-300
Wymiar platformy (W x D) [mm]	250 x 310	250 x 310
Zakres czasu pracy	ciągły lub do 47 godz. 59 min	ciągły lub do 47 godz. 59 min
Wyświetlacz	LED	LED
Kontroler	mikroprocesor cyfrowy PID	mikroprocesor cyfrowy PID
Wymiary przestrzeni roboczej (W x D x H) [mm]	900 x 640 x 620	1200 x 600 x 620
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	900 x 790 x 1920	1200 x 825 x 1920
Zasilanie i moc grzewcza [V / Hz / W]	230 / 50 / 800	230 / 50 / 1200

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl