



KOMORA LAMINARNA BIOHAZARD NUAIRE NU-677

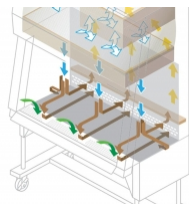

INNE ZDJĘCIA

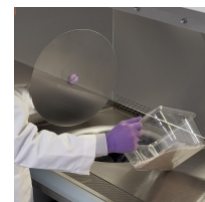

OPIS OGÓLNY

Komora laminarna typ **BIOHAZARD** dla zwierzętarni **LabGard ES NU-677** – II klasy bezpieczeństwa A2 **firmy NuAire** oferuje sterylne warunki pracy ze zwierzętami oraz w trakcie pozostałych procedur w każdych warunkach w pozycji siedzącej i stojącej. Komora **NU-677** pozwala na wygodną pracę dzięki:

- silnikowi Energy Saver pozwalającemu na mniejsze zużycie energii nawet o 40% oraz obniżenie poziomu hałasu (67 dB),
- elektrycznie regulowanej wysokości podstawy komory, ułatwiającej dobór odpowiedniej wysokości obszaru pracy,
- dużemu otworowi robocznemu o wysokości 305 mm umożliwiającemu bezproblemowe wprowadzenie większości standardowych klatek i innych urządzeń - okno może być otwarte na wysokość 508 mm w celu wprowadzenia do wnętrza większych przedmiotów,
- bardzo dużej powierzchni obszaru roboczego pozwalającej na wygodną i produktywną pracę,
- oświetleniu zamontowanemu w tylnej części komory nad blatem roboczym, pozwalającemu na pracę w pozycji siedzącej lub stojącej i zapewniającemu idealną widoczność obszaru pracy,
- łatwemu dostępowi do filtra wstępnego oraz gładkiej powierzchni obszaru roboczego zapewniającemu łatwość czyszczenia,
- łatwemu do demontażu blatowi robocznemu, umożliwiającemu czyszczenie powierzchni pod blatem,
- dozownikom pokarmu (max. 4).

Właściwości:

- ochrona operatora, produktu i środowiska - typ **BIOHAZARD**,
- przepływ prawdziwie laminarny,
- system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą: **30% wyrzut / 70% recyrkulacja**,
- innowacyjny system **HEPEX™** przeciwdziałający rozszczelnieniu komory,
- dwa duże filtry absolutne **HEPA** - obszaru pracy i wylotowy o średniej efektywności 99,9997%,
- gwarantowany **czas życia filtrów 7 lat* i 14 000 godzin pracy**,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony, łatwy do demontażu,
- duża głębokość robocza - 63,5 cm,
- dren powierzchni pracy,
- boki komory bezpieczne - pełne,
- okno przednie suwane góra-dół z bezpiecznego szkła hartowanego, całkowicie zamykane,
- elektroniczny system sterowania,
- wskaźnik zapchania filtrów HEPA,
- alarm nieprawidłowej pozycji okna,
- źródło światła białego, bezcieniowe, powyżej 1200 lux,
- podstawa podnoszona elektrycznie zaopatrzona w kółka,
- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy,
- gniazda elektryczne (2 podwójne) zamontowane na tylnej ścianie obszaru roboczego.

*dla ustawień fabrycznych

MODELE

- **NU-677-400E**
- **NU-677-500E**
- **NU-677-600E**

CERTYFIKATY

ISO9001, ISO13485, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	NU-677-400E	NU-677-500E	NU-677-600E
Rozmiar nominalny (roboczy) [m]	1,2	1,5	1,8
Rodzaj komory	z zintegrowaną podstawą	z zintegrowaną podstawą	z zintegrowaną podstawą
Wymiary komory [mm]:			
Wysokość maksymalna	2477	2477	2477
Wysokość minimalna	2007	2007	2007
Szerokość	1362	1667	1972
Głębokość	832	832	32
Wysokość dostępowa okna [mm]	305	305	305
Inflow [m/s]	0,53	0,53	0,53
Wymiary strefy roboczej (H x W x D) [mm]	711 x 1178 x 635	711 x 1483 x 635	711 x 1788 x 635
Wysokość w pełni otwartego okna dostępowego [mm]	508	508	508

Ilość wytwarzanego ciepła BTU na godzinę (niewentylowane) (wentylowane)	2551 157	2669 178	2787 198
Waga netto [kg]	340 kg	369 kg	398 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- lampa UV zamontowana na tylnej ścianie obszaru roboczego,
- zawór gazowy zamontowany na bocznej ścianie obszaru roboczego.

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl