


POLIPROPYLENOWY WYCIĄG LABORATORYJNY TOPAIR



INNE ZDJĘCIA

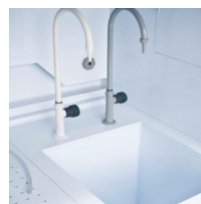

OPIS OGÓLNY

Urządzenia wykonane z polipropylenu wysokiej jakości, odporne na korozję, o doskonałej odporności na substancje chemiczne. Polipropylen zwiększa wytrzymałość komory i poprawia jej właściwości termiczne.

Komora zapewnia ochronę operatora przed oparami kwasów oraz niebezpiecznymi gazami, działania których standardowe wyciągi ze stali mogą nie wytrzymać. Szkodliwe i nieprzyjemne opary chemiczne są usuwane w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego środowiska pracy. Usuwanie oparów poza budynek odbywa się za pomocą wentylatora zewnętrznego zamontowanego w dachu lub w ścianie. Komory przeznaczone są do pracy z ciężkimi chemikaliami i produkowane są zgodnie z normami EN-14175, ASHRAE 110-1995 oraz CE.

Właściwości:

- konstrukcja wykonana z białego polipropylenu zapewniającego wysoką odporność chemiczną,
- jednoczęściowa konstrukcja,
- wbudowany polipropylenowy blat,
- zasysanie powietrza zarówno z góry, jak również z tyłu panelu,
- szyba frontowa suwana, wykonana z hartowanego szkła,
- przyjazne środowisku, energooszczędne oświetlenie typu LED o intensywności 800 lux, zainstalowane poza strefą pracy dygestorium,

- podstawa - szafka z drzwiami,
- opcjonalnie: zlew / kranik / zawór gazu / zawór próżni,
- przyjazny dla użytkownika cyfrowy system sterowania wentylatorem i kontroli oświetlenia,
- dodatkowe opcje: system VAV, wybór materiału wykonania blatu.

MODELE

- FH-120-PP
- FH-150-PP
- FH-180-PP
- FH-200-PP
- FH-250-PP

CERTYFIKATY

CE, ASHRAE, EN14175

SPECYFIKACJA

MODEL	FH-120-PP	FH-150-PP	FH-180-PP	FH-200-PP
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	1200 x 830 x 2320	1500 x 830 x 2320	1800 x 830 x 2320	2000 x 830 x 2320
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	1000 x 630 x 1170	1300 x 630 x 1170	1600 x 630 x 1170	1800 x 630 x 1170
Max. wysokość okna dostępowego [mm]	720			
Standardy produkcji	EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995			
Prędkość przepływu powietrza	0,5±0,1 m/s (100±20 FPM)			
Materiał obudowy	biały polipropylen			
Materiał strefy pracy	HPL / ceramika / epoksyd / polipropylen / stal nierdzewna			
Opcjonalny system	system VAV z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem 9’’			
Opcje standardowe	kranik / zawór gazu / zawór próżniowy/ zlew z polipropylenu			
Oświetlenie	800 lux, oświetlenie LED			

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- podstawa,
- zlewik polipropylenowy,
- kranik,
- gniazdko elektryczne,
- wentylator 1,1 kW.

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl