

PID: DH.xWIG03xxx
UID: 050-03-1-DH.xWIG03xxx-0
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2021 14:06






WYPOSAŻENIE
LABORATORIUM

INKUBATORY Z OBIEGIEM NATURALNYM DAIHAN THERMOSTABLE™ SIG / IG



INNE ZDJĘCIA

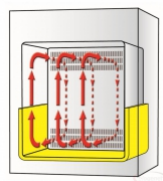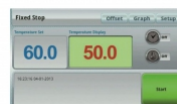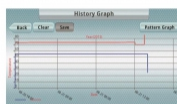

OPIS OGÓLNY

Inkubatory z obiegiem naturalnym **SIG SMART / IG** firmy **DAIHAN**.

Właściwości:

- zoptymalizowany, naturalny przepływ powietrza zapobiega krzyżowym zakażeniom próbek,
- do różnych zastosowań: hodowla mikroorganizmów, hodowla komórek roślinnych i zwierzęcych, inkubacja w stałych temperaturach, kiełkowanie roślin itp.,
- opatentowany system kontroli **Jog-Dial** (seria **IG**),
- sterownik **Smart-Lab™** (seria **SIG**),
- ergonomiczny, kolorowy, 4-calowy ekran dotykowy LCD (seria **SIG**),
- wyświetlacz LCD z podświetleniem (seria **SIG**),
- usługa **WiRe™ App & Web** (seria **SIG**),
- WiFi (seria **SIG**),
- funkcja autodiagnostyki (seria **SIG**),
- automatyczna rejestracja danych (seria **SIG**),
- ustawianie różnych programów dla wielu aplikacji z wieloma segmentami (seria **SIG**),

- złącze RS232C do komunikacji i sterowania za pomocą komputera PC,
- wnętrze ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali lakierowanej,
- 2 druciane półki,
- drzwi wewnętrzne - szklane, hartowane,
- funkcje alarmu: błąd i wyłączenie timera,
- ochrona przed przegrzaniem,
- wykrywanie uszkodzenia sensora.

MODELE

- **ThermoStable™ SIG / IG-32**, poj. 32 L
- **ThermoStable™ SIG / IG-50**, poj. 50 L
- **ThermoStable™ SIG / IG-105**, poj. 105 L
- **ThermoStable™ SIG / IG-155**, poj. 155 L

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	ThermoStable™ SIG / IG-32	ThermoStable™ SIG / IG-50	ThermoStable™ SIG / IG-105	ThermoStable™ SIG / IG-155
Pojemność [L]	32	50	105	155
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	312 x 290 x 360	370 x 350 x 420	485 x 410 x 535	550 x 475 x 600
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	458 x 477 x 624	518 x 537 x 701	635 x 595 x 841	700 x 660 x 906
Zakres temperatury [°C]	+5 powyżej temperatury otoczenia do +70			
Dokładność temperatury [°C]	±0,2 przy 37, ±0,3 przy 50			
Rozkład temperatury [°C]	±0,6 przy 37, ±1,0 przy 50			
Rozdzielczość wyświetlacza [°C]	±0,1			
Czas nagrzewania [min]	25 (do 37°C); 40 (do 50°C)			30 (do 37°C); 40 (do 50°C)
Czas przywracania temperatury (dla drzwi otwartych przez 30 sek.) [min]	8 (do 37°C); 12 (do 50°C)		10 (do 37°C); 15 (do 50°C)	
Timer	99 godz. 59 min. (funkcja opóźnienia, tryb pracy ciągłej)			
Obieg powietrza	naturalny, grawitacyjny			
Waga [kg]	32	40	59	71

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- półki druciane, teflonowe lub ze stali nierdzewnej

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl