

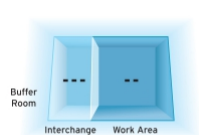


KOMORA DO PRACY Z FARMACEUTYKAMI NUAIRE NU-NTE800

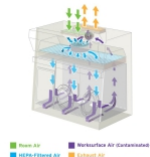

INNE ZDJĘCIA

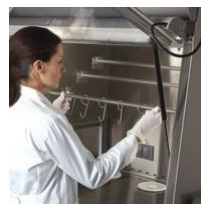

OPIS OGÓLNY

Izolator do pracy z farmaceutykami **Pharmagard NU-NTE800** firmy NuAire.

Izolator z negatywnym ciśnieniem względem pomieszczenia i całkowitym wyrzutem powietrza oczyszczonego **Pharmagard NU-NTE800** spełnia wszystkie wymagania określone przez normę USP Std.797 i 800 niezbędne do wytwarzania produktów farmaceutycznych w warunkach sterylnych i bezpiecznych. **Pharmagard NU-NTE800** jest stosowana do pracy z materiałami niebezpiecznymi (np. cytostatyki) stanowiącymi zagrożenie dla operatora.

Właściwości:

- obszar roboczy z klasą czystości 100 (ISO poziom 5),
- ciśnienie negatywne, minimalizuje możliwość wycieku materiałów niebezpiecznych poza strefę pracy,
- przepływ prawdziwie laminarny minimalizujący turbulencje,
- znakomita widoczność obszaru roboczego,

- miękkie rękawy umożliwiające pracę w obszarze roboczym,
- duże otwory do podłączania rękawów nie ograniczające ruchów operatora,
- innowacyjny system **HEPEX™** przeciwdziałający rozszczelnieniu komory,
- filtry absolutne **HEPA** – dostępowy i wylotowy o efektywności 99,99% z całkowitym wyrzutem,
- gwarantowany **czas życia filtrów 7 lat* i 14 000 godzin pracy**,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony, łatwy do demontażu,
- zewnętrzne oświetlenie redukujące odbicia oraz nagrzewanie się obszaru pracy,
- duże drzwi dostępne do komory transferu,
- uchylane okno frontowe pozwalające na pełny dostęp do wnętrza w celu czyszczenia,
- wewnętrzne uchwyty relingowe z 6 hakami,
- panel kontrolny ze wskaźnikiem zapchania filtra minihelic i klawiaturą dotykową.

**dla ustawień fabrycznych*

MODELE

- **NU-NTE800-400**
- **NU-NTE800-600**

CERTYFIKATY

ISO9001, ISO13485, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	NU-NTE800-400	NU-NTE800-600
Rozmiar nominalny (roboczy) [m]	1,2	1,8
Rodzaj komory	z dedykowaną podstawą	z dedykowaną podstawą
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	1270 x 826 x 1550	1880 x 826 x 1550
Wymiary wewnętrzne (części roboczej) (W x D x H) [mm]	895 x 591 x 695	1505 x 591 x 695
Wymiary wewnętrzne (części rękawicowej) (W x D x H) [mm]	359 x 610 x 695	359 x 610 x 695
Waga [kg]	211	279
Downflow [m/s]	0,18 do 0,23	0,18 do 0,23
Wydmuch standard CFM/CMH: Ciśnienie statyczne (w.g. - słup wody)	425/722 51 mm w.g.	550/935 51 mm w.g.
Ilość wytwarzanego ciepła BTU na godzinę	539	880
Moc oświetlenia [lux]	>800	>800

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- podstawa opuszczana i podnoszona ręcznie lub elektrycznie,
- różne typy rękawów,
- półki na instrumenty,
- system gromadzenia odpadów (w tym odpadów ostrych).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl