


WIRÓWKI UNIWERSALNE



INNE ZDJĘCIA

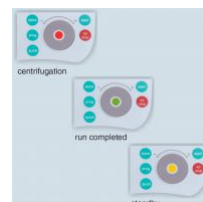

OPIS OGÓLNY

Wirówki laboratoryjne **firmy Hermle** przeznaczone są do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących małej i średniej pojemności probówki wirownicze.

Wszystkie modele wirówek laboratoryjnych wyposażone są w silniki bezobsługowe (bezsztotkowe) oraz łatwe w obsłudze panele sterujące.

Wszechstronna wirówka **Z 287 A** wyposażona jest w jedenaście różnych rotorów do najczęstszych zastosowań. Bez względu na to czy zastosowany jest rotor uchylny, stałokątowy czy hematokrytowy, zawsze można znaleźć odpowiednie do nich akcesoria. Atrakcyjny design i innowacyjny panel sterowania z funkcją dotykową i lampką LED wskazującą aktualny stan pracy, uzupełniają wszechstronność tego modelu.

Mała uniwersalna wirówka **Z 307** oferuje szeroki zakres zastosowania, co spełnia wymagania laboratoriów klinicznych, badawczych, jak również małych laboratoriów przemysłowych. **Z 307** oferuje wiele akcesoriów włączając rotory do mikropłytek i szybkoobrotowe rotory kątowe do naczyń reakcyjnych lub probówek wirowniczych do objętości 50 mL. Dodatkowo rotory horyzontalne 4 x 200 mL mogą być stosowane do hodowli komórkowych, a także dla wszystkich popularnych probówek na krew. Ten szeroki zakres akcesoriów czyni z modelu **Z 307** wirówkę laboratoryjną niezbędną w laboratoriach badawczych i małych laboratoriach klinicznych.

Wirówki **Z 327** i **Z 327 K** oferują szeroki wybór rotorów czyniąc je idealnymi do różnorodnych zastosowań badawczych. Rotory horyzontalne mikropojemności lub rotory kątowe dużych objętości mogą być w łatwy sposób wymienione w ciągu kilku sekund. **Z 327 K**

zawiera system chłodzenia umieszczony z tyłu urządzenia, co sprawia, że można ją umieścić na stole laboratoryjnym o szerokości 40 cm.

Wirówki **Z 366** i **Z 366 K** zapewniają wszechstronność wykorzystania, łatwą obsługę i programowanie. Oba modele umożliwiają wirowanie probówek stożkowych 28 x 15 mL z siłą odśrodkową 24321 x g, co sprawia, że wirówki są zaliczane do grupy uniwersalnych wirówek dużej mocy.

MODELE

- **Z 287 A**
- **Z 307**
- **Z 327**
- **Z 327 K**
- **Z 366**
- **Z 366 K**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

SPECYFIKACJA

MODEL	Z 287 A	Z 307	Z 327	Z 327 K	Z 366	Z 366 K
Chłodzenie	nie	nie	nie	tak	nie	tak
Przycisk krótkiego wirowania	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Max. prędkość [obr./min]	14000	14000	18000	18000	15000	16000
Max. przyspieszenie [x g]	16058	18624	23542	23542	21379	24325
Max. pojemność [mL]	6 x 50	4 x 200	4 x 200	4 x 200	6 x 250	6 x 250
Czas pracy	10 sek. - 59 min 50 sek. (krok co 10 sek.); 1 godz. - 99 godz. 59 min (krok co 1 min)					
Wymiary (W x D x H) [cm]	35 x 43 x 26	35,5 x 47,4 x 33	40 x 48 x 36	40 x 70 x 36	43 x 51 x 36	72 x 51 x 36
Waga [kg]	18	30	43	60	52	77
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Pobór mocy [W]	170	240	460	660	520	785

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- rotory,
- adaptery,
- zawieszki.

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl